


エンベッドヒーターワイヤ呼吸回路

Embedded Heated Wire Circuit

加温機能比較

Plastiflexのエンベッドヒーターワイヤ呼吸回路は回路内をむらなく一定に加温するため結露が発生しません。

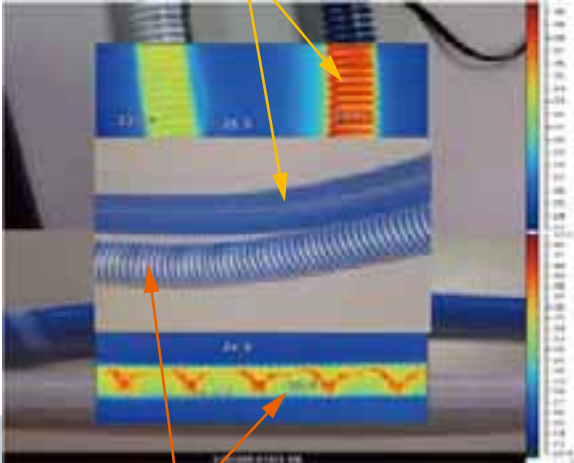

回路管腔内のスパイラル状ヒーターワイヤではワイヤのみ加温されるため加温されない低温部が残り、結露が発生します。


呼吸回路に均一に熱線を巻き付けた構造は、むらなく回路内を加温することができ、加湿されたフローによる呼吸回路内の結露の発生を効率的に抑制します。エンベッドヒーターワイヤ呼吸回路キットは、ご使用の人工呼吸器、患者さんにあわせて5タイプからお選びいただけます。




エンベッドヒーターワイヤ呼吸回路：資料

結露コントロール・ベンチテスト


吸気回路に於ける比較

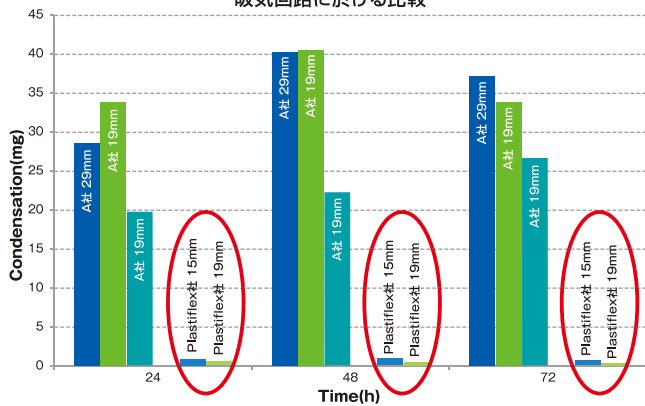

呼気回路に於ける比較

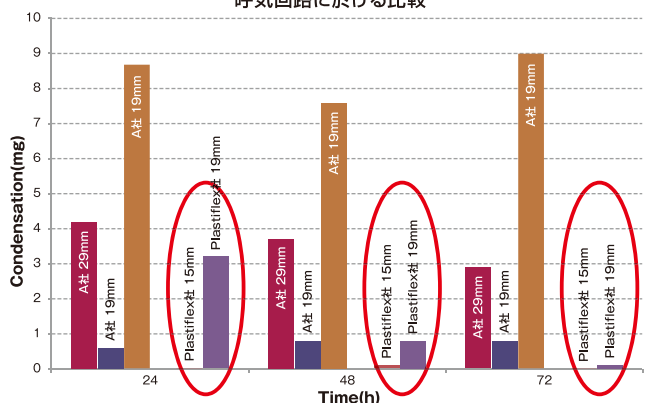


回路構成 対 エアフロー抵抗

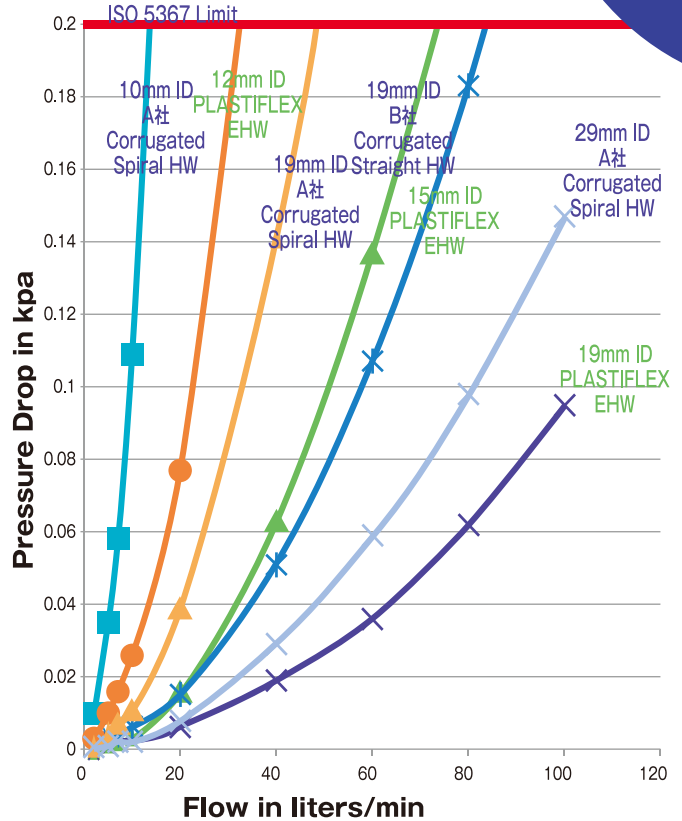

エンベッドヒーターワイヤ成人用加温加湿呼吸回路(デュアルヒート)


51003932 ¥80,000 JAN 4582244694321

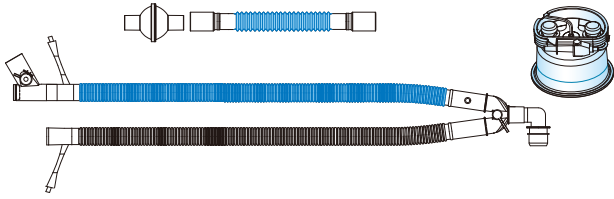

(入数：10セット)

エンベッドヒーターワイヤ小児用加温加湿呼吸回路(デュアルヒート)


51003934 ¥80,000 JAN 4582244694413

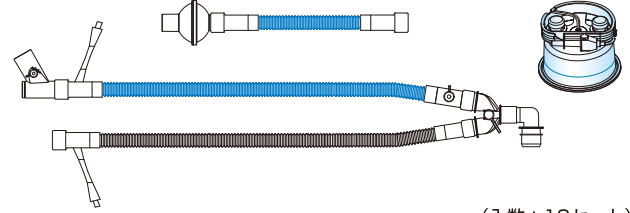

(入数：10セット)

エンベッドヒーターワイヤ成人用加温加湿呼吸回路(シングルヒート)


51003931 ¥62,000 JAN 4582244694390

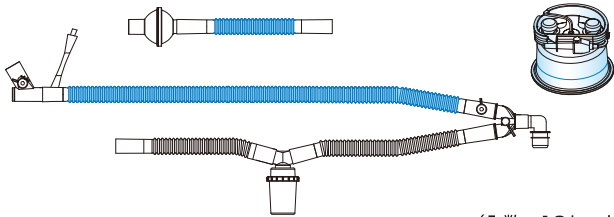

(入数：10セット)

エンベッドヒーターワイヤ小児用加温加湿呼吸回路(シングルヒート)


51003933 ¥62,000 JAN 4582244694406

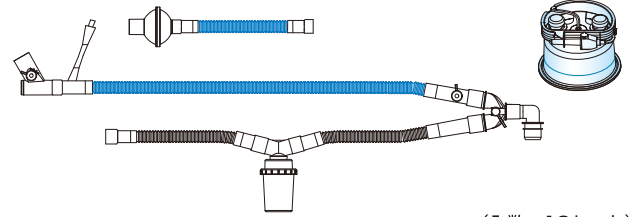

(入数：10セット)

エンベッドヒーターワイヤNIV汎用加温加湿呼吸回路

51003928 ¥50,000 JAN 4582244694307

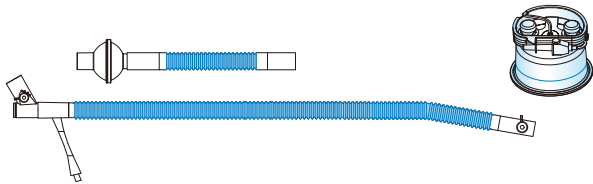

(入数：10セット)

圧ラインコネクタ・プレッシャーライン付 (内径5.1mm)

51004575 ¥7,000 JAN 4582244696042



(入数：10セット)

プレッシャーライン (内径3.2mm)

51004574 ¥2,000 JAN 4582244696035



(入数：10セット)

- 価格は消費税抜き表示です。
- 外観、仕様改良のため予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。

製造販売業者



パシフィックメディコ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12

TEL: 03-3500-0816 FAX: 03-3862-9693

www.pacific-medico.com

