

高流量酸素ブレンダ (ノンブリードタイプ)
PMB-7000



高流量酸素ブレンダ (ローブリードタイプ)
PMB-5000



加温加湿器
PMH7000PLUS




ネーザルカニューラ

HIGH FLOW SYSTEM


吸気時

吸気量よりも高いフローでガスを供給することにより吸気をサポートします。また、加温加湿器を介してフローが供給されるので、酸素療法にみられる気道内の乾きが軽減され、快適な治療を提供します。

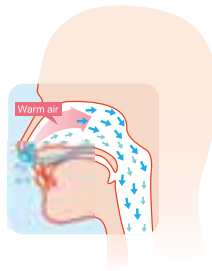

呼気時

呼気時に流れるフローにより、鼻腔内の死腔量が低減し、換気効率が改善されます。

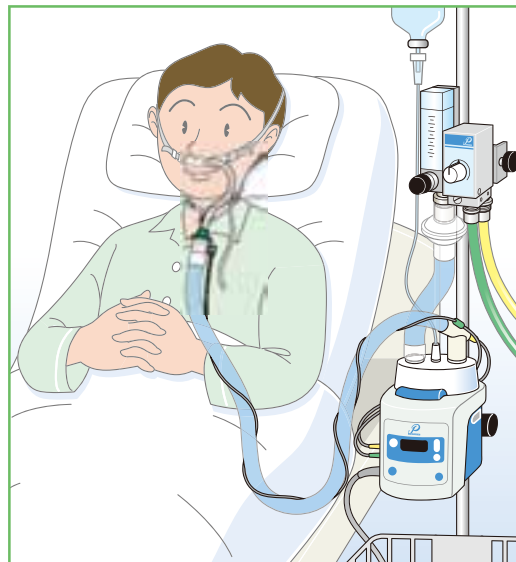

製品仕様

高流量酸素ブレンダ PMB-7000 (ノンブリードタイプ)	
酸素濃度設定	21 ~ 100 %
流量設定	0 ~ 70 LPM
供給ガス	空気-酸素 (0.2MPa ~ 0.5MPa)
差圧アラーム	片ガス及び 0.08MPa ~ 0.17MPa の差圧で笛による警報音
寸法 / 重量	H104 × W57 × D125 mm / 約 1.04 kg
届出番号	11B2X10017HM0012
パーツナンバー	PMB-7000NHF
JAN コード	4546409111146


高流量酸素ブレンダ PMB-5000 (ローブリードタイプ)	
酸素濃度設定	21 ~ 100 %
流量設定	6 ~ 60 LPM
供給ガス	空気-酸素 (0.45±0.1MPa)
差圧アラーム	片ガス及び 0.2MPa 以上の差圧で笛による警報音
寸法 / 重量	H150 × W60 × D105 mm / 約 995g
届出番号	11B3X10028NB0090
パーツナンバー	PMB-5000NHF
JAN コード	4582244692471

加温加湿器 PMH7000PLUS	
患者口元温度	設定: 30 ~ 40 °C 表示: 10 ~ 45 °C
チャンバ出口温度	設定: 26 ~ 43 °C 表示: 10 ~ 55 °C
電氣的定格	100 VAC 50/60 Hz 2.5 A
ヒータ最大出力	150 W
寸法 / 重量	H145 × W140 × D180 mm / 約 1.7 kg
認証番号	220AABZX00151000
パーツナンバー	610020
JAN コード	4582244697032


オプション

品名	パーツナンバー	JANコード
ネーザルカニューラ(2号)(10入)	NH22-PA	4582244692426
ネーザルカニューラ(3号)(10入)	NH23-PA	4582244692433
ネーザルカニューラ(4号)(10入)	NH24-PA	4582244692440
エンベッドヒーターワイヤNIV汎用加温加湿呼吸回路(10入)	51003928	4582244694307
NIV汎用呼吸回路ヒーターワイヤ付(PMC-300AF付)(10入)	51003708	4582244692303
NIV汎用呼吸回路ヒーターワイヤ付(10入)	51003707	4582244692297


エンベッドヒーターワイヤNIV汎用加温加湿呼吸回路 (PMC-300AF付)
P/N 51003928

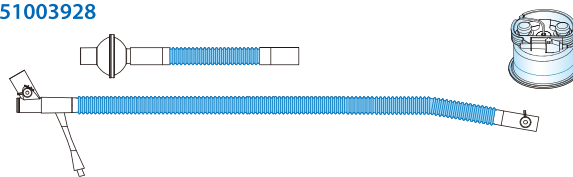

NIV汎用呼吸回路 ヒーターワイヤ付 (PMC-300AF付)
P/N 51003708

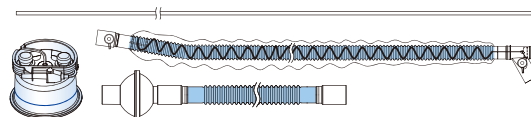

NIV汎用呼吸回路 ヒーターワイヤ付
P/N 51003707

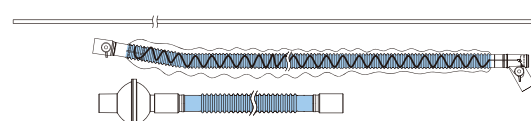

● 外観、仕様改良のため予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。

販売業者



パシフィックメディコ 株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12
TEL: 03-3500-0816 FAX: 03-3862-9693
www.pacific-medico.com

製造販売業者/製造業者 (PMB-5000)

有限会社 サンユーテクノロジー
〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン1-2-8
TEL: 048-951-3627

製造販売業者 (PMB-7000)

株式会社 スカイネット
〒113-0033 東京都文京区本郷3-42-5
TEL: 03-3814-1133