



The logo for P MEDICO, featuring a stylized white 'P' on a dark blue circular background with the word 'MEDICO' in white capital letters below it.




加温加湿器

PMH8000


- 日本国内で開発および製造
- 相対湿度コントロール、相対湿度モニタ(温度&湿度プローブ使用時)
- IPPV(侵襲)NPPV(非侵襲)モードの自動設定と手動設定
- 空焚きアラーム搭載(温度&湿度プローブ使用時)

視認性に優れたグラフィック

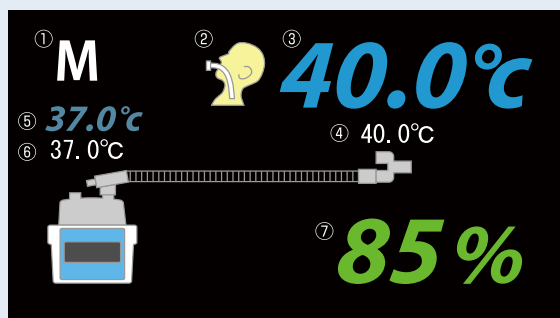

- ①オート/マニュアル設定表示 ②モード
 ③口元温度実測値 ④口元温度設定値
 ⑤チャンバ出口温度実測値 ⑥チャンバ出口温度設定値
 ⑦口元相対湿度実測値(温度&湿度プローブ使用時)

温度と相対湿度のトレンドグラフ

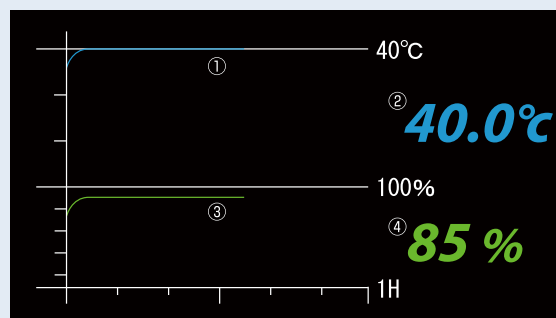

- ①口元温度トレンドグラフ
 ②口元温度実測値
 ③口元相対湿度トレンドグラフ(温度&湿度プローブ使用時)
 ④口元相対湿度実測値(温度&湿度プローブ使用時)

製品仕様

患者口元温度	設定範囲	30.0~40.0°C (0.5°C刻み)			
	プリセット値	IPPVモード設定時: 40.0°C NPPVモード設定時: 34.0°C			
	表示範囲	10.0~45.0°C (0.1°C刻み)			
チャンバ出口温度	設定範囲	26.0~43.0°C (0.5°C刻み) 患者口元温度設定値に対して-4~+3°Cの範囲			
	プリセット値	IPPVモード設定時: 37.0°C NPPVモード設定時: 31.0°C			
	表示範囲	10.0~60.0°C (0.1°C刻み)			
患者口元相対湿度 (温度&湿度プローブ使用時)	湿度制御	IPPVモード設定時: 約85% NPPVモード設定時: 約90%			
	表示範囲	10~99% (1%刻み)			
アラーム	患者口元温度 高温異常/低温異常、チャンバ出口温度 高温異常/低温異常、空焚き、ヒーターワイヤ/プローブ外れ、チャンバ外れ、ヒータープレート異常				
電源	AC100V 50/60Hz 2.5A				
消費電力	250VA				
寸法	140(幅)×149(高さ)×204(奥行)mm (加湿チャンバを取り付けない状態)				
重量	約1.7kg				
品名	パーツナンバー	JANコード	認証番号	構成品	
加湿加湿器 PMH8000	619001	4582244698152	225AABZX00036000	本体、温度&湿度プローブ、吸気ヒーターワイヤ中継コード、取扱説明書、添付文書	
オプション	パーツナンバー	JANコード	オプション	パーツナンバー	JANコード
吸気ヒーターワイヤ中継コード	51108	4582244692600	ボールクランプブラケット(太)	50003290	4582244693102
吸気呼気ヒーターワイヤ中継コード	51109	4582244692617	ボールクランプブラケット(細)	90990027	458224469297
PMH8000用温湿度プローブ	51110	4582244694369	ウォーターバッグポール	550525	4582244691887
PMH8000用温湿度プローブヘッド	51117	4582244694376	チャンバ PMC-300F (40入)	50102800	4582244682694
PMH8000用温湿度プローブ本体	51118	4582244694383	チャンバ PMC-500F (20入)	50104500	4582244682786
PMH8000用温度プローブ	51121	4582244696752	オートフィードチャンバPMC-300AF (10入)	50109000	4582244690521
PMH8000用温度プローブヘッド	51119	4582244696769			

- 外観、仕様改良のため予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。

製造販売業者



パシフィックメディコ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12
TEL: 03-3500-0816 FAX: 03-3862-9693
www.pacific-medico.com

06010419J-W