

VEGA

COMPRESSOR NEBULIZER

# VIGORmist

ヴィガーミスト

## 短時間で効率的に吸入可能

サイドストリームの使用により5ミクロン以下の粒子の含有率を80%に高めた、新しいメカニズムのコンプレッサ式ネブライザです。

## コストパフォーマンスの追求

付属品も充実、すべて予備用が含まれていますので購入してすぐご使用いただけます。

### ご注意

本製品は、在宅患者及び個人で1日複数回ご使用して頂く目的で設計されております。病医院等での複数患者の連続使用目的には適応できませんので保証の対象外です。

標準価格 **18,800**円(税抜)



P  
MEDICO

COMPRESSOR NEBULIZER

# VIGORmist Lite

ヴィガーミスト ライト

## 小型・高性能コンプレッサを採用

小型コンプレッサは持ち運びに優れ、置く場所を選びません。

### ご注意

本製品は、在宅患者及び個人で1日複数回ご使用して頂く目的で設計されております。病医院等での複数患者の連続使用目的には適応できませんので保証の対象外です。

標準価格 **14,800**円(税抜)




# Sidestream サイドストリーム




- 迅速・正確・安全なエアロゾル療法に最も適したネブライザです。
- 院内の壁配管からもご使用いただけます。

- サイドストリームは排気口から外気を取り込み、噴出量を毎分6Lから16Lに増大させます。
- 薬液を無理なく効率的に吸入できます。

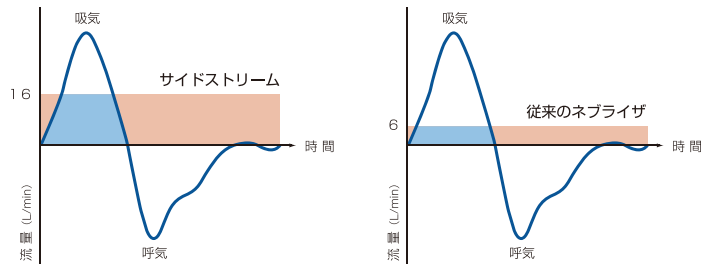

- 5ミクロン以下の含有率を80%に高めた新しいメカニズムのネブライザです。
- MMD3.0ミクロン、下気道吸入療法に最適です。

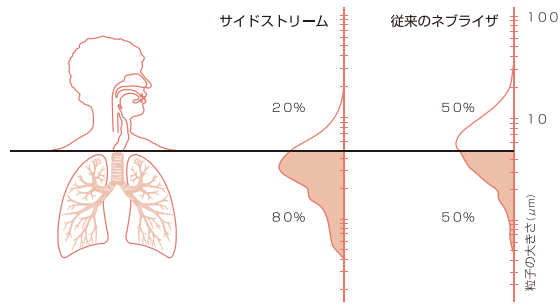

## VIGOR mist 製品仕様

電源	AC100V 50/60Hz
音量	約60dBA
圧力	55kPa(8psi)以上
流量	6LPM以上
寸法	W180×H115×D300mm(本体のみ)
重量	2.1kg(本体のみ)
医療機器届出番号	13B1X00181000006

## 構成品

本体 リューザブルサイドストリーム リューザブルマウスピース  
 エアチューブ(2本) ディスポーザブルサイドストリーム&マウスピース  
 フィルタ(5個) 取扱説明書 添付文書

品名	パーツナンバー	標準価格(税抜)	JANコード
ヴィガーミスト	CN01-P16	¥ 18,800	4582244684261

## VIGOR mist Lite 製品仕様


電源	AC100V 50/60Hz
音量	約60dBA
圧力	55kPa(8psi)以上
流量	6LPM以上
寸法	W140×H160×D100mm(本体のみ)
重量	1.5kg(本体のみ)
医療機器届出番号	13B1X00181000007

## 構成品

本体 ディスポーザブルサイドストリーム(2個)  
 ディスポーザブルマウスピース(2個)  
 エアチューブ(2本) フィルタ(5個) 取扱説明書 添付文書

品名	パーツナンバー	標準価格(税抜)	JANコード
ヴィガーミストライト	CN02	¥ 14,800	4582244684315

消耗品	パーツナンバー	標準価格(税抜)	JANコード
㊸リューザブルマウスピース	FJMD1605E	¥ 750	4582214252704
㊹リューザブルサイドストリーム	FJMD1201E	¥ 3,750	4582214252681
㊺ディスポーザブルマウスピース	FJMD1601E	¥ 150	4582214252698
㊻ディスポーザブルサイドストリーム	FJMD4445	¥ 500	4582214252735
㊼ヴィガーミスト用エアチューブ	CN01-SP1	¥ 800	4582244684278
㊽成人用マスク	FJMD1100E	¥ 480	4582214252667
㊾小児用マスク	FJMD1120E	¥ 480	4582214252674
フィルタ(10個)	CN01-SP2	¥ 800	4582244684285

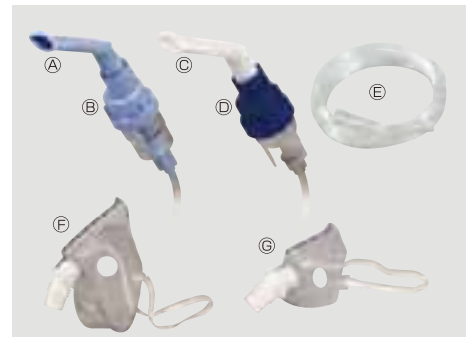

- 外観、仕様改良のため予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。

製造販売業者



パシフィックメディコ 株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12  
 TEL: 03-3500-0816 FAX: 03-3862-9693  
[www.pacific-medico.com](http://www.pacific-medico.com)



09010419J-W